



# MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PĘCHERZYKOWE, PODWYŻSZONE I WYSOKIE

## MATERACE PĘCHERZYKOWE PODWYŻSZONE I WYSOKIE


**model 250 PROFILAKTYKA I LECZENIE  $\leq$  II<sup>0</sup> ODLEŻYN** (zależnie od wyboru pompy).  
**podwyższony materac pęcherzykowy, AIR -system, wersja długoterminowa PU, 36 miesięcy gwarancji.**  
Dzięki 13 cm wysokości materac znacznie redukuje siły ucisku ciała leżącej na nim osoby. Wysokość materaca nie zabezpiecza chorego przed kontaktem z konstrukcją łóżka, należy go układać na elastycznych podkładach (np. materacach gąbkowych). Materac występuje wyłącznie w wersji dwusekcyjnej, posiada dwa przewody powietrza łączące go z pompą. Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych, oraz do opieki szpitalnej, deklaracja zgodności CE.

zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni oraz pokrowiec







do leczenia stopnia odleżyn




termoplastyczny poliuretan




wartość utrzymywanego ciśnienia




AIR - system mikrootworów




podwyższony materac pęcherzykowy




wymaga podkładu gąbkowego




materac 2-sekcyjny




tryb zmienny




tryb statyczny



wzmacnione przewody




zamek pokrowca








szybkozłączka transportowa

**opcje**



made in Technology

## do współpracy z pompami; Tania, Supra, Lux, Dyna, Dyna Best.

**materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:**

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED<sup>®</sup>; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub matercem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zawory reanimacyjne CPR, AIR- system, LubriMed<sup>®</sup>-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy  $\leq$  15 cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, uchwyty prześcieradła, komory spodnie, komory wzdluzne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, wzmacnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwośliż wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp.

przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

**współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:**

Tania, Supra, Lux, Dyna, Alfa.



ISO  
13485  
9001



tel. 800 10 10 01

**model 250, cechy:**

14 cm wysokości

PU medyczny

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 190 x 90 cm

skuteczność medyczna wg masy pacjenta  $\leq 125$  kgwytrzymałość mechaniczna  $\leq 130$  kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 6 mm

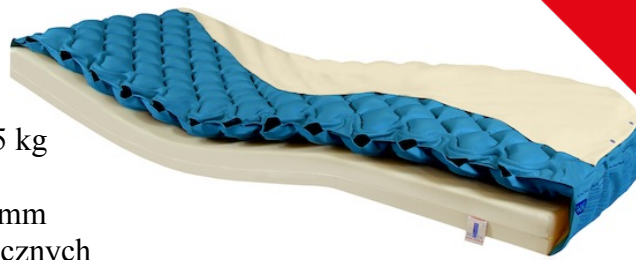
130 punktów podparcia w 26 komorach poprzecznych

wyporność, objętość  $\leq 140$  litrów

materac z wyłogami stabilizującymi

AIR -system (układ mikrootworów, przez które wydostaje się w kierunku pacjenta powietrze wspomagając wentylację jego ciała).

deklaracja zgodności CE



zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni oraz pokrowiec

**parametry techniczne**

wymiary po napompowaniu (cm, +/- 5%)

materiał, z którego wykonany jest materac

ilość sekcji

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta (kg)

wytrzymałość mechaniczna (kg)

wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)

ilość komór poprzecznych

ilość punktów podparcia (pęcherzyków)

wyporność, objętość (litry)

air –mikrootwory

wyłogi stabilizujące

użytkowa minimalna wartość ciśnienia (mmHg)

dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia (mmHg)

maksymalny czas użytkowania

tryb pracy

masa własna (kg)

temperatura pracy ( $^{\circ}$ C)temperatura transportu i magazynowania ( $^{\circ}$ C)

dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania

zgodność z dyrektywą

gwarancja

część aplikacyjna

deklaracja zgodności CE

wyrób medyczny

**model 250**

190 x 90 x 14

medyczne PU

2

 $\leq 125$  $\leq 130$ 

6

2 x 26

130

 $\leq 140$ 

tak

tak

20

 $\leq 130$ 

nie określono

ciągły (zmienny lub statyczny)

4, 4

10 - 45

-15 - 70

20 - 80 %

93/42/EEC

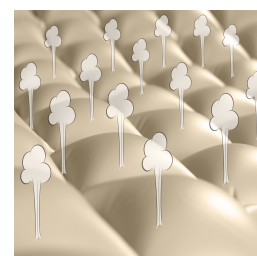
36 miesięcy

przy połączeniu z pompą REVITA,

materac stanowi część BF

tak

tak

**zawartość opakowania, dostawy**

1 materac pęcherzykowy w opakowaniu foliowym,

2 przewód do połączenia z pompą,

3 instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną,



tel. 800 10 10 01

## MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE PĘCHERZYKOWE, PODWYŻSZONE I WYSOKIE

model 255 PROFILAKTYKA I LECZENIE  $\leq$  III<sup>0</sup> ODLEŻYŃ (zależnie od wyboru pompy).

wysoki materac pęcherzykowy, AIR -system, wersja długoterminowa PU, 36 miesięcy gwarancji.

Wysoki na 21 cm materac o budowie plastra miodu, działa profilaktycznie i leczniczo dzięki właściwościom odciążającym i chłodzącym. Spośród materacy pęcherzykowych posiada największą redukcję siły ucisku.

Nie wymaga układania jako wyściółki materaca gąbkowego. Zabezpiecza chorego przed kontaktem z konstrukcją łóżka.

Materac występuje wyłącznie w wersji dwusekcyjnej, posiada dwa przewody powietrza łączące go z pompą.

Do indywidualnej opieki doraźnej- materac dla osób trwale unieruchomionych, oraz do opieki szpitalnej.

Deklaracja zgodności CE.



ISO  
13485  
9001

zdjęcie przedstawia dodatkowy pokrowiec



### opcje



### materac; opcje dodatkowe, wykonanie seryjne, opcjonalne:

pokrowiec medyczny; wykonany z nylonu lub pokrowiec membraMED<sup>®</sup>; miękki, paro-przepuszczalny, elastyczny z PU- zapinany zamkiem błyskawicznym, nitami lub zaciągany taśmą, szyty lub zgrzewany, stabilizacja materaca z łóżkiem lub materacem spodnim (wyłogi, narożne taśmy lub regulowane pasy mocujące), zawory reanimacyjne CPR, AIR- system, LubriMed<sup>®</sup>-wewnętrzny wkład redukujący wartość sił ścinających, spodni materac piankowy  $\leq$  15 cm (zintegrowany lub dodatkowy), obniżona sekcja pięt, poduszka siedzeniowa, wkłady, podkłady gąbkowe, pozycjonery, uchwyty prześcieradła, komory spodnie, komory wzdluzne, komory rotacyjne materaca, podkład rotacyjny materaca, szybkozłączka transportowa materaca, wzmocnione przewody powietrza, uchwyty do przemieszczania i transportu, wytrzymała torba transportowa, łatwoślizg wersja UNO lub ROLO, wkład kąpielowy, itp. przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.

### współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita, polecamy konfigurację z pompami:

Tania, Supra, Lux, Dyna, Alfa, Dyna Best.



tel. 800 10 10 01



**model 255, cechy:**

21 cm wysokości

PU medyczny

materac dwusekcyjny

wymiary po napompowaniu 190 x 90 cm

skuteczność medyczna wg masy pacjenta  $\leq 130$  kgwytrzymałość mechaniczna  $< 130$  kg

przewody do połączenia z pompą o średnicy 6 mm

130 punktów podparcia w 26 komorach poprzecznych

wyporność, objętość  $\leq 210$  litrów

AIR -system (układ mikrootworów,

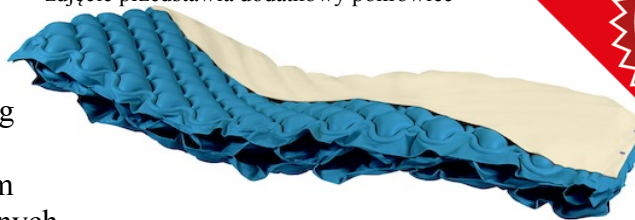
przez które wydostaje się w kierunku pacjenta powietrze wspomagając wentylację jego ciała).

integralna warstwa stałościśnieniowa / komory spodnie

2 zawory kierunkowe

zawór CPR

zdjęcie przedstawia dodatkowy pokrowiec

**parametry techniczne**

wymiary po napompowaniu (cm, +/- 5%)

materiał, z którego wykonany jest materac

ilość sekcji

dopuszczalna maksymalna masa pacjenta (kg)

wytrzymałość mechaniczna (kg)

wewnętrzna średnica przewodów zasilających (mm)

ilość komór poprzecznych

ilość punktów podparcia (pęcherzyków)

wyporność, objętość (litry)

air –mikrootwory

integralna warstwa stałościśnieniowa / komory spodnie

użytkowa minimalna wartość ciśnienia (mmHg)

dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia (mmHg)

maksymalny czas użytkowania

tryb pracy

masa własna (kg)

temperatura pracy ( $^{\circ}$ C)temperatura transportu i magazynowania ( $^{\circ}$ C)

dopuszczalna wilgotność podczas pracy i magazynowania

zgodność z dyrektywą

gwarancja

część aplikacyjna

deklaracja zgodności CE

wyrób medyczny

**model 255**

190 x 90 x 21

medyczne PU

2

 $\leq 130$  $\leq 130$ 

6

3 x 26

130

 $\leq 210$ 

tak

tak

10

 $\leq 130$ 

nie określono

ciągły (zmienny lub statyczny)

6, 6

10 - 45

-15 - 70

20 - 80 %

93/42/EEC

36 miesięcy

przy połączeniu z pompą REVITA,

materac stanowi część BF

tak

tak

**zawartość opakowania, dostawy**

1 materac pęcherzykowy w opakowaniu foliowym,

2 przewód do połączenia z pompą, zawiera CPR

3 instrukcja obsługi urządzenia wraz z kartą gwarancyjną,



tel. 800 10 10 01