

**Seria 450****Chłodziarki farmaceutyczne DIN 5834***Pharmacy Refrigerator DIN 58345***Charakterystyka techniczna****MPRA 450 S | MPRA 450 G**

- **Obudowa i wnętrze ze stali plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania**
- **Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%**
- **Fabrycznie ustawiona temp. nominalna +5°C, może być łatwo regulowana w zakresie od +2°C do +8°C**
- **Izolacja o gr. 50mm z Poliuretanu na bazie wody, zapewnia większą stabilność temperatury**
- **Dynamiczny Układ Chłodzenia oraz Automatyczne Odszranianie, zapewniają wewnątrz optymalny obieg powietrza, oraz szybką stabilizację i równomierny rozkład temperatury po każdorazowym otwarciu drzwi**
- **Regulowane Półki pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów, wyk. ze stali plastyfikowanej 5 x (475 x 470mm)**
- **Kosz na dole (W455 x D350 x H200mm)**
- **Przeszkłone Drzwi z podwójnego, niskoemisyjnego, hartowanego szkła zapobiegającego kondensacji wody**
- **Drzwi Przystawne, samoczynnie zamykane z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie**
- **Otwór Walidacyjny o średnicy 12mm, umożliwiającą połączenie sondy z zewnętrznym systemem monitoringu**
- **Dodatkowa mobilna sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temperaturę w dowolnym miejscu urządzenia**
- **Wewnętrzne poziome Oświetlenie LED**
- **4 Koła + 2 Regulowane Nogi, umożliwiające łatwe przemieszczanie i poziomowanie sprzętu nawet na nierównych powierzchniach**
- **Zamek na klucz, zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi**
- **Sterownik ADVANCE (patrz specyfikacje szczegółowe)**
- **Termostat Bezpieczeństwa, który gwarantuje, że w żadnym przypadku temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C i chroni w ten sposób przechowywane produkty**
- **Spełnia wymogi Normy DIN 58345**

*Technical Features**MPRA 450 S | MPRA 450 G*

- *Inside and Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use*
- *Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%*
- *Factory setpoint set at +5°C, can be easily adjusted in the range from +2°C to +8°C*
- *Polyurethane Water Base Insulation 50mm, ensures greater temperature stability*
- *Ventilated Cooling and Automatic Defrosting System, designed to optimize the air distribution inside, achieving stability and uniformity of temperature as well as quick recovery in case of door opening*
- *Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion 5 x (475 x 470mm)*
- *Basket in the Bottom (W455 x D350 x H200mm)*
- *Glass Door with Double Tempered Low Emissive Glass and no condensation System*
- *Reversible Door with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning*
- *Hole for External Probe, with 12mm diameter, allowing a easy access by an external monitoring system*
- *Additional mobile probe, working as a mass simulator, allows measure the specific temperature at any point on the equipment*
- *Horizontal LED Lighting Inside*
- *4 Rollers + 2 Levelers, allowing transport and level the equipment even in uneven surfaces*
- *Locker Included, to prevent unauthorized access*
- *ADVANCE Controller (see specifications)*
- *Safety Thermostat, which guarantees that under no circumstances the temperature inside the equipment will be below +2°C, protecting the products stored inside*
- *Compliant with DIN Directive 58345*

**Aksesoria** *Accessories***Półka** *Shelf*

Kod. 007122

**Półka Inox** *Inox Shelf*

Kod. 108666

**Zaczep Półki***Shelf Holder* Kod. 004042\_002**Szuflada** *Drawer Kit*

Kod. 129043\_1

**Separatory do szuflad***Separator Drawer Kit*


Kod. 129044

**Dolny kosz** *Basket*

Kod. 003356\_100

**Wnętrze Inox 450** *Inside Inox*


Kod. 129045\_2

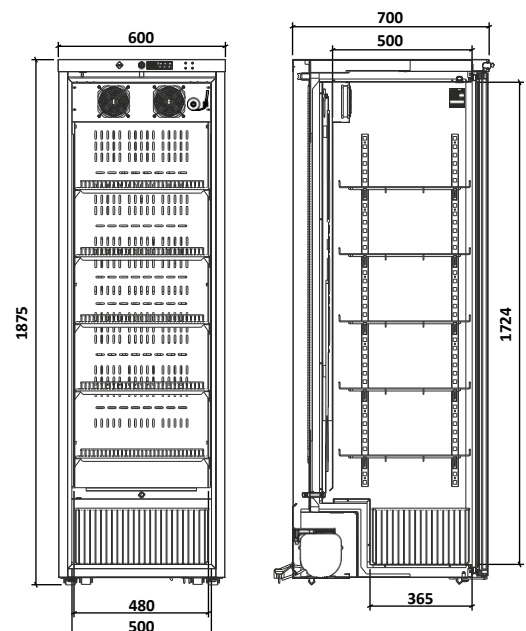**Opakowanie drewniane***Wood Package*


 +2°C  
 +8°C  
 Zakres temperatur  
 Temperature Settings



**MPRA 450 S**

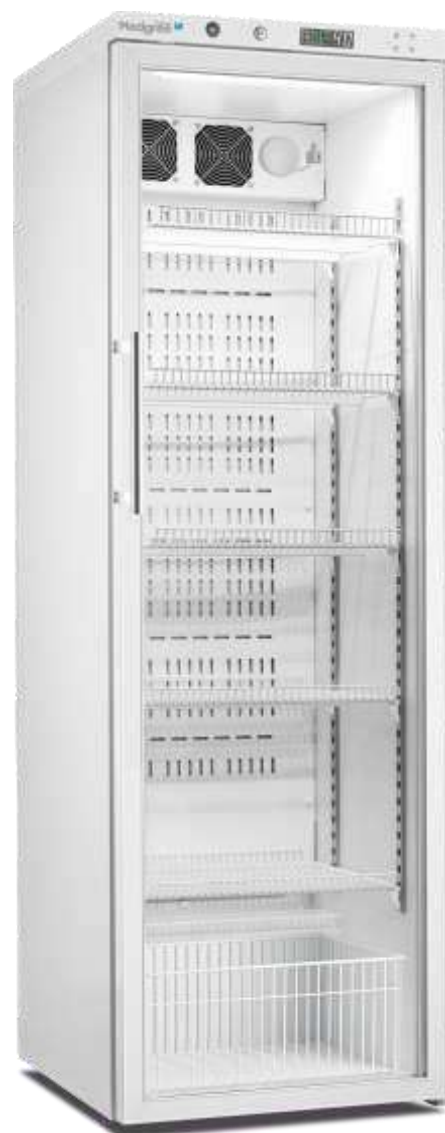

**MPRA 450 G**

Kod Code	Model Model	Szer. Width	Gł. Depth	Wys. Height	Pojemność l. Volume	Waga Kg Weight	Moc Power	Napięcie Tension / Freq.	Zużycie Energii Consumption	Półki Shelves	Poziom szumu Noise Level	Gaz Gas
800904_1000	MPRA 450 S	600mm	700(+50)mm	1865mm	416	93	210W	230V - 50Hz	877 kWh/rok kwh/year	5	< 50 dB	R 600a
800906_1400	MPRA 450 G	600mm	700(+50)mm	1865mm	416	105	220W	230V - 50Hz	965 kWh/rok kwh/year	5	< 50 dB	R 600a