

# Zamrażarki Laboratoryjne -25°

## Laboratory Freezer -25°

### Charakterystyka techniczna MLF 150 S | MLF 450 S

- Powierzchnia wnętrza z Białego Aluminium ułatwiająca czyszczenie
- Obudowa ze stali plastyfikowanej w kolorze białym, która gwarantuje brak korozji podczas użytkowania
- Przeznaczona do pracy w zakresie temperatury otoczenia 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%
- Fabrycznie ustawiona temp. nominalna -18°C, może być łatwo regulowana w zakresie od -10°C do -25°C
- Izolacja o gr. 50mm = MLF 150, 80mm = MLF 450 z Poliuretanu na bazie wody, zapewnia większą stabilność temperatury
- Statyczny Układ Chłodzenia na ścianach umożliwia zmianie wysokości półek i manualne odszranianie. Model 450 ze względu na dużą pojemność wyposażony jest w wewnętrzny wentylator zapewniający szybką stabilizację temperatury po otwarciu drzwi
- Regulowane Półki pozwalają dostosować przestrzeń do różnych typów przechowywanych produktów, wyk. ze stali plastyfikowanej  
MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)  
MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)
- Drzwi Przystawne (Model 150), samoczynnie zamykane z ergonomicznym uchwytem ułatwiającym czyszczenie
- MLF 150 | 4 Regulowane Nogi, umożliwiające łatwe poziomowanie sprzętu nawet na nierównych powierzchniach
- MLF 450 | 4 Koła + 2 Regulowane Nogi, umożliwiające łatwe przemieszczanie i poziomowanie sprzętu nawet na nierównych powierzchniach
- Zamek na klucz, zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi
- Sterownik typu Easy (patrz specyfikacje szczegółowe)

### Technical Features

#### MLF 150 S | MLF 450 S

- Inside Surface in White Aluminum for easy cleaning of surfaces
- Outside Surface in Special White Steel (Skinplate), which guarantees the absence of corrosion with use
- Designed to work with temperature between 10°C and 30°C degrees, and relative humidity up to 55%
- Factory setpoint set at -18°C, can be easily adjusted in the range from -10°C to -25°C
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm = MLF 150 80mm = MLF 450, ensures greater temperature stability
- Cooling System with Static Cold on the Walls, allowing to move the shelves in height, with Manual Defrost. In the 450 due to the internal volume, exist an internal fan for fast temperature recovery in case of door opening
- Removable Shelves to adjust to the type of product to be conserved, in Plastified Steel, to avoid corrosion  
MLF 150 | 2 x (460 x 407mm) + 1 x (460 x 240mm)  
MLF 450 | 5 x (413 x 438mm)
- Reversible Door (Model 150) with Self Closing to closed position, with ergonomic designed handle for easy cleaning
- MLF 150 | 4 Adjustable Feet, allowing to level the equipment even in uneven surfaces
- MLF 450 | 4 Rollers + 2 Levelers, allowing you to move and level the equipment easily
- Locker Included, to prevent unauthorized access
- Easy Controller (see specifications)

### Aksesoria Accessories

**Półka Mała MLF 150** *Small Shelf*  
Kod. 007120

**Półka Duża MLF 150** *Large Shelf*  
Kod. 007120\_001

**Półka MLF 450** *Shelf*  
Kod. 007122\_100


**Zaczep Półki**  
*Shelf Holder* Kod. 004042\_002

**Kosz Mały MLF 150** *Small Basket*  
Kod. 003353\_100

**Kosz Duży MLF 450** *Big Basket*  
Kod. 003353

**Listwy do łączenia w pion MLF 150**  
*White Stacking Kit*  
Kod. 129032\_100

**Opakowanie drewniane**  
*Wood Package*

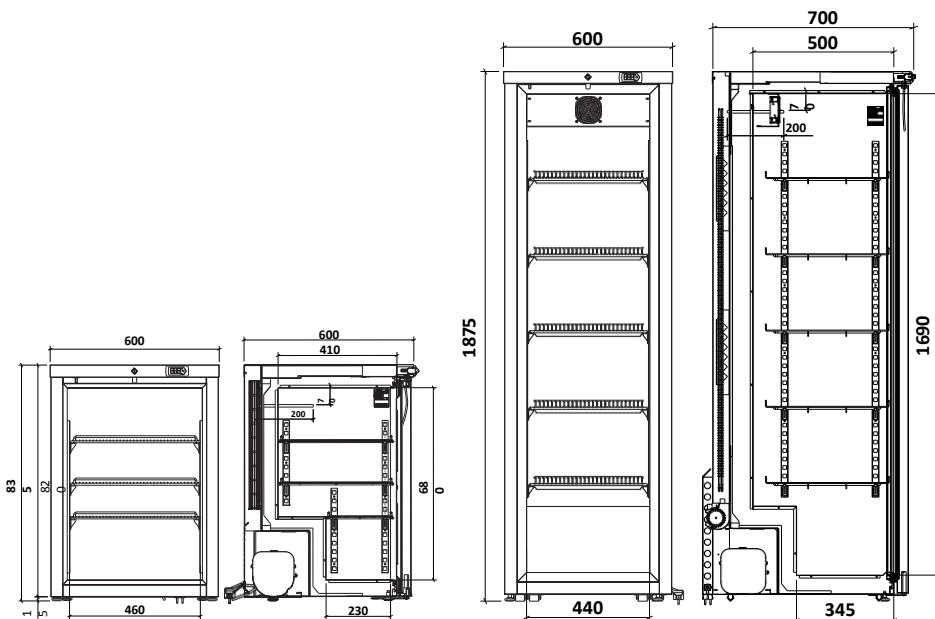

 -10°C  
-25°C  
Zakres temperatur  
Temperature Settings



**MLF 150 S**



**MLF 450 S**

Kod Code	Model Model	Szer. Width	Gl. Depth	Wys. Height	Pojemność l. Volume	Waga Kg Weight	Moc Power	Napięcie Tension / Freq.	Zużycie Energii Consumption	Półki Shelves	Poziom szumu Noise Level	Gaz Gas
800911_400	MLF 150 S	600mm	600(+50)mm	835mm	115	45	78W	230V - 50Hz	569 kwh/rok kwh/year	3	< 45 dB	R 600a
800920_600	MLF 450 S	600mm	700(+50)mm	1875mm	355	97	320W	230V - 50Hz	1300 kwh/rok kwh/year	5	< 50 dB	R 290