

WIELOFUNKCYJNY PAKIET ANTYKONDENSATOWY


AquaVap®

Innowacyjny koncept

Wyjątkowa chłonność właściwa pakietowi **AquaVap®** pozwala na zachowanie dobrej jakości suchej nasyconej pary, co jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia skutecznej sterylizacji, nawet w przypadkach nadmiaru wody w pojemnikach lub tacach.


AquaVap® pomaga również w utrzymaniu integralności suchej, sterylnej bariery.

Gwarancja jakości sterylizacji

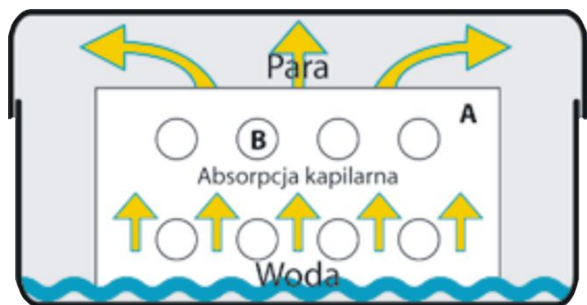

AquaVap® jest przeznaczony do pochłaniania nadmiernej ilości wody zalegającej wskutek kondensacji wewnątrz pojemników lub tac. Wilgoć i woda wnikają w podstawę **AquaVap®** oraz boczne otwory, a następnie przedostają się do górnej części **AquaVap®** za sprawą kapilarności, co pomaga w odparowaniu nadmiaru wody.

Koniec z nadmiarem kondensatu

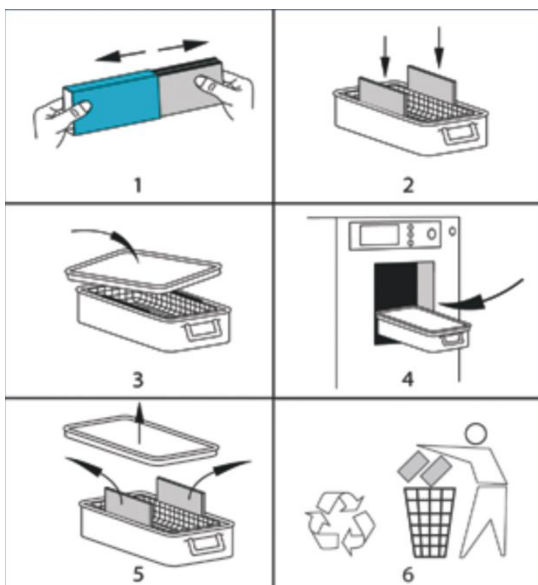

Cały nadmierny kondensat, zostanie pochłonięty przez umieszczenie pakietu **AquaVap®** po każdej stronie tacy lub pojemnika.

Ważne jest, aby umieścić po jednej części pakietu **AquaVap®** po przeciwnej stronie kontenera, aby upewnić się, że nadmiar wody zostanie „odpompowany” z najniższego punktu załadunku.



AQUAVAP	
Typ	Opakowanie
402 AquaVap Mini	100 szt.
412 AquaVap Standard	50 szt.
422 AquaVap do tac	50 szt.

ROZMIARY PAKIETÓW	
Typ	Rozmiar
402 AquaVap Mini	2 części każda 200x50x4 mm
412 AquaVap Standard	2 części każda 200x100x4 mm
422 AquaVap do tac	2 części 200x50x4 mm połączone rozszerzalną podstawą od 210mm do 310mm

semigat sa

KTG SEMIGAT SA

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa, Polska
Tel./faks: 22/ 619-86-13
e-mail: semigat@semigat.pl
www.semigat.pl