



88% pacjentów oceniło maskę AirFit N20 lepiej pod względem komfortu niż wiodącą na rynku maskę nosową.²

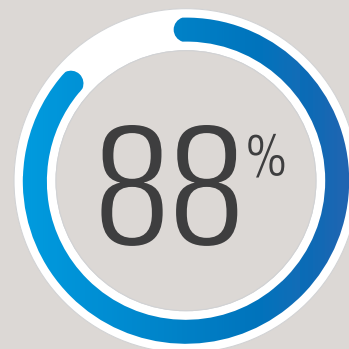

Ewolucja technologii części silikonowej: zmienna grubość dla większego komfortu i stabilności

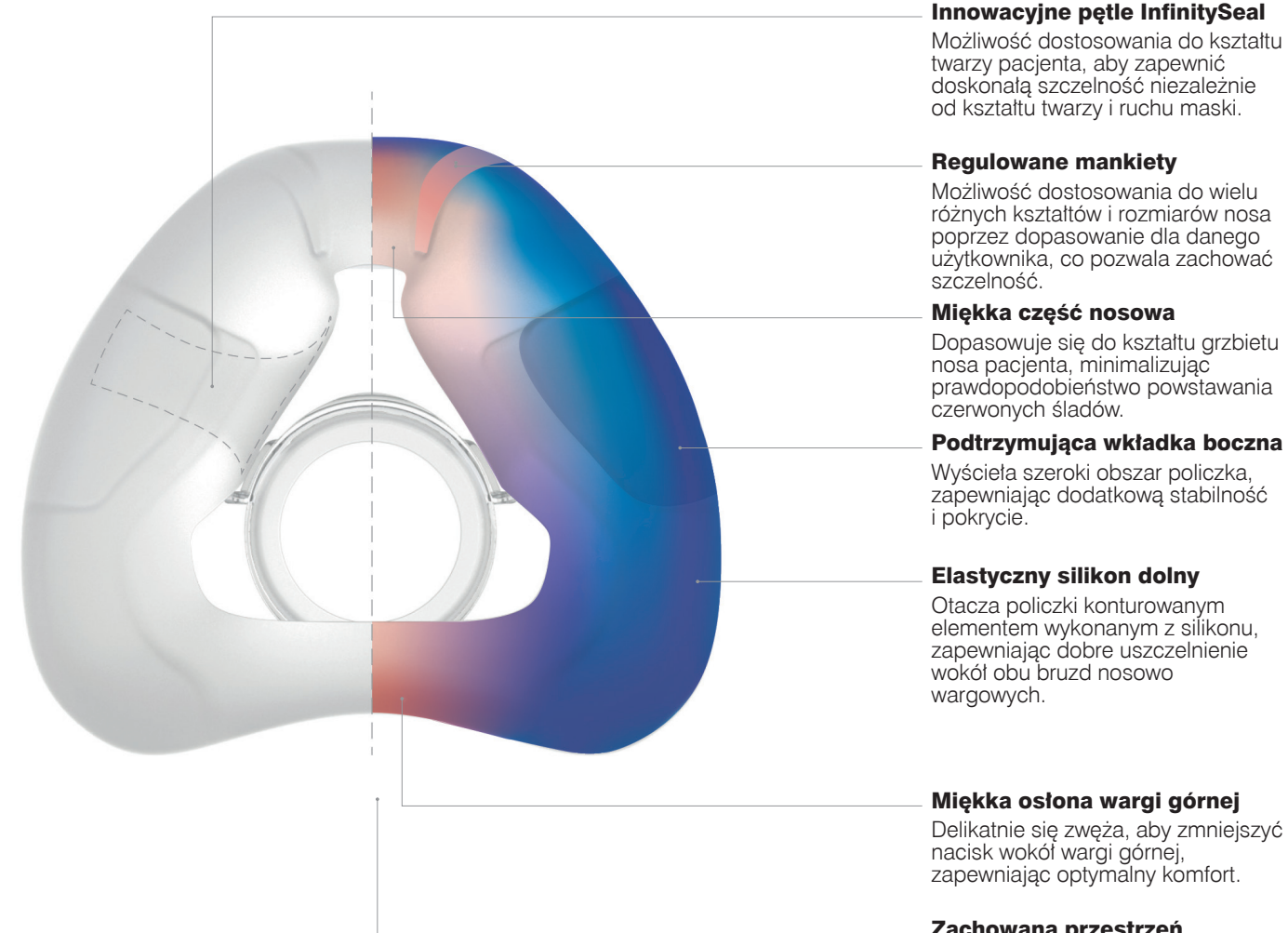

Innowacyjne pętle InfinitySeal
Możliwość dostosowania do kształtu twarzy pacjenta, aby zapewnić doskonałą szczelność niezależnie od kształtu twarzy i ruchu maski.

Regulowane mankiety
Możliwość dostosowania do wielu różnych kształtów i rozmiarów nosa poprzez dopasowanie dla danego użytkownika, co pozwala zachować szczelność.

Miękka część nosowa
Dopasowuje się do kształtu grzbietu nosa pacjenta, minimalizując prawdopodobieństwo powstawania czerwonych śladów.

Podtrzymująca wkładka boczna
Wyściela szeroki obszar policzka, zapewniając dodatkową stabilność i pokrycie.

Elastyczny silikon dolny
Otocza policzki konturowanym elementem wykonanym z silikonu, zapewniając dobre uszczelnienie wokół obu bruzd nosowo-wargowych.

Miękka osłona wargi górnej
Delikatnie się zwięża, aby zmniejszyć nacisk wokół wargi górnej, zapewniając optymalny komfort.

Zachowana przestrzeń w pobliżu wargi górnej
Zapewnia dużo miejsca dla ust i umożliwia wygodne poruszanie wargami.

Komfort **Stabilność**



Dopasowanie maski AirFit N20 – przewodnik



- 1 Rozpocznij od upewnienia się, że klipsy magnetyczne na dolnych paskach nie są zapięte.
- 2 Jeśli są zapięte, należy je odłączyć, obracając i zdejmując z ramki.



- 3 Załóż uprząż przez głowę, upewniając się, że logo firmy ResMed jest skierowane na zewnątrz.



- 4 Dolne paski ustaw tak, aby znajdowały się pod uszami.
- 5 Ustaw magnesy w pobliżu odpowiednich zacisków na ramce.



- 6 Dopasuj rzepy mocujące na paskach górnych do momentu, kiedy maska będzie ułożona równo i stabilnie.



- 7 Powtórz czynność 4 z dolnymi paskami.



- 8 Podłącz przewód powietrza urządzenia do kolanka, a następnie wcisnij kolanko z przodu maski do momentu kliknięcia.
- 9 Uruchoom urządzenie.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



Opcje dodatkowe

- 10 Pacjent może umieścić dolną część uprząży na włosach lub pod włosami, aby dopasować ją do fryzury.

¹ ResMed AirFit N20 internal global fitting study of 159 existing ResMed patients, conducted 12/11/2015 ; ID A3697629.
² ResMed internal study of 24 existing ResMed patients, conducted between 23/11/2015 - 21/12/2015 comparing the market leading mask with AirFit N20 ; ID A3695085.

ResMed Polska sp. z o.o.
ul. Pokorna 2/U18A, 00-199 Warszawa
tel.: +48 22 539 22 00 email: biuro@resmed.pl

AirFit and InfinitySeal are trademarks of ResMed Ltd.
Specifications may change without notice.
© 2016 ResMed Ltd. 1019396/1 2016-09



AirFit™ N20
Maska nosowa



Kompaktowa maska nosowa. Zaprojektowana w celu optymalnego dopasowania dla każdego pacjenta

Twarz każdego pacjenta jest inna, ale dzięki nowej masce AirFit N20 dopasowanie jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Kompaktowa maska nosowa nie przesłania pacjentowi linii wzroku i nie utrudnia poruszania się dzięki części silikonowej InfinitySeal™ – stworzonej, aby zapewnić niezawodną szczelność, niezależnie od kształtu i rozmiarów twarzy.



Łatwa w dopasowaniu

W międzynarodowym badaniu nowa maska AirFit N20 została dopasowana u 99,4% pacjentów.¹ Dopasuj maskę już za pierwszym razem dzięki części silikonowej dostosowanej do różnych kształtów i rozmiarów twarzy.

Wygodna w użyciu


Kompletna maska charakteryzuje się niezwykłą lekkością i miękkością – od części silikonowej do ramki i uprząży.

Swobodne widzenie


Dzięki minimalnemu kontaktowi z twarzą oraz ramce w przestrzeni pod oczami pacjenta, AirFit N20 umożliwia czytanie w łóżku lub oglądanie telewizji.

Ulubiona maska nosowa

92% pacjentów preferuje maskę AirFit N20 zamiast wiodącej na rynku maski nosowej.²

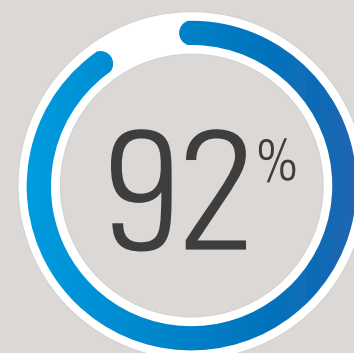

W międzynarodowym badaniu maska AirFit N20 została dopasowana u 99,4% pacjentów.¹

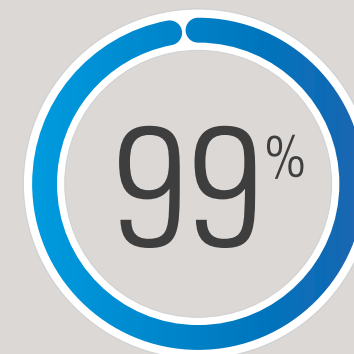


Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Maska AirFit N20 jest wyposażona w trzy wymienne rozmiary silikonu – mały, średni i duży. Modułowa budowa maski AirFit N20 oznacza, że każdy rozmiar silikonu można łatwo założyć na tę samą ramkę. Pozwala to na łatwiejszą wymianę silikonu.

Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.

Szablon można pobrać ze strony internetowej ResMed.com/AirFitN20

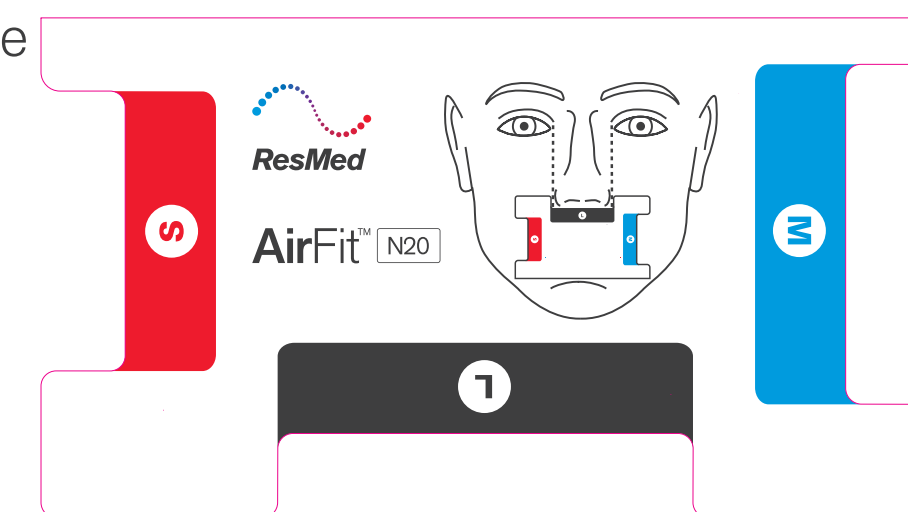

Minimalna ilość części sprawia, że maska AirFit N20 jest łatwa w użyciu i czyszczeniu

Miękka i delikatna

Skonstruowana tak, aby była wyjątkowo miękka, pluszowa uprząż ułatwia pacjentom szybkie i komfortowe przyzwyczajanie się do terapii.

Niezawodne uszczelnienie

Zapewnia pacjentom niezawodne i skuteczne uszczelnienie dzięki odpornemu na rozzerwanie i niewłaściwe dopasowanie silikonowi InfinitySeal, zapewniającemu dobre uszczelnienie w warunkach zmiennego ciśnienia.

Łatwe poruszanie się

Krótka, elastyczna rurka łączy kolanko z przewodem urządzenia CPAP, umożliwiając pacjentom łatwiejsze poruszanie się bez naciągania przewodu i powodowania przecieków.

Miękka ramka


Ramka, od strony twarzy, jest wyścielana miękkim materiałem, aby zapewnić komfort w każdym punkcie.

Swobodne widzenie

Zapewnia pacjentom lepsze pole widzenia i możliwość zachowania aktywności w pozycji leżącej, dzięki ramce w przestrzeni pod oczami, która zapewnia stabilność i minimalizuje kontakt z twarzą.

Krótki czas zakładania

Zakładanie i zdejmowanie maski jest wygodne i łatwe dzięki klipsom magnetycznym mocującym uprząż do ramki w ciągu kilku sekund.

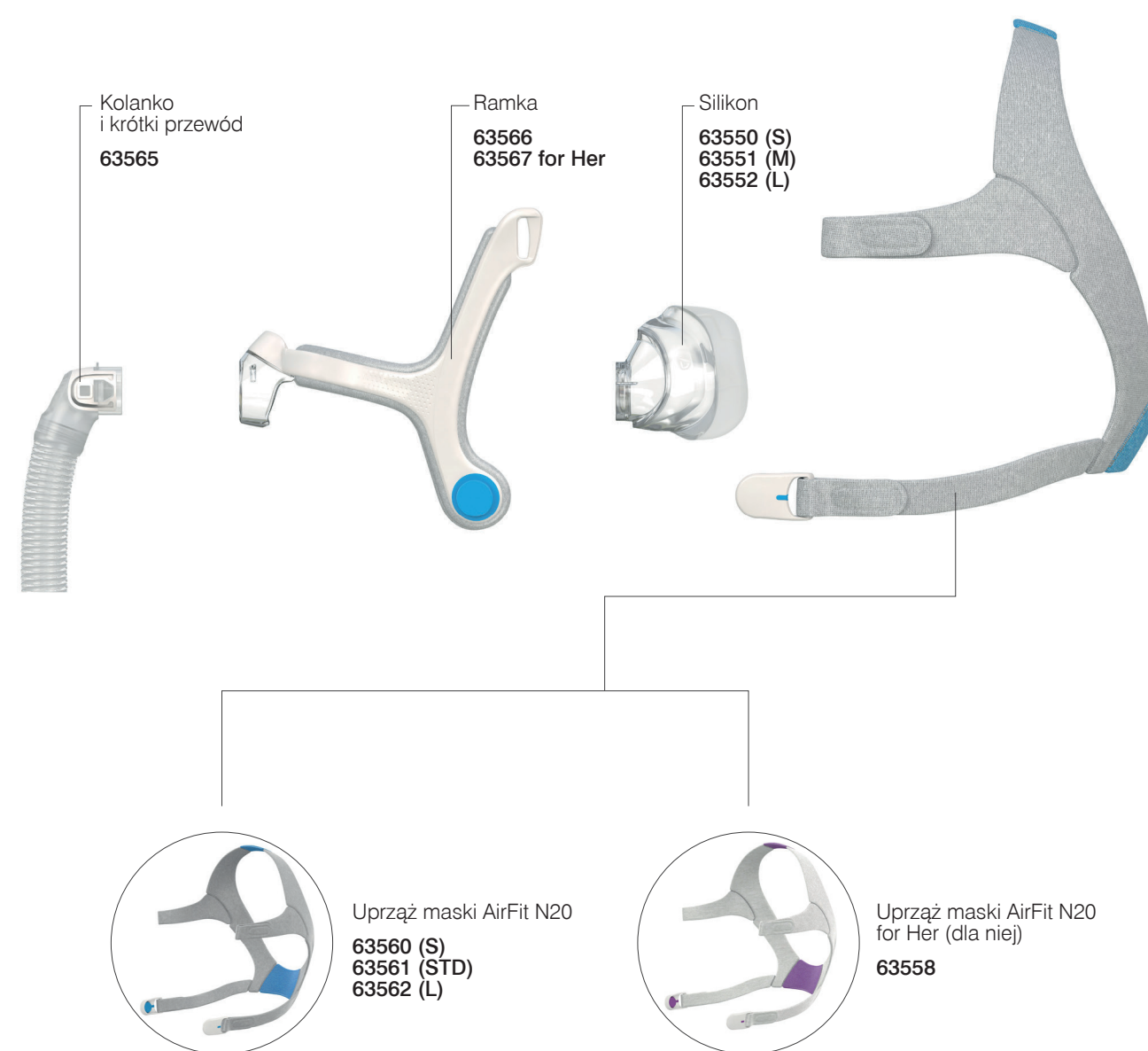

AirFit N20 for Her (dla niej)

Przeznaczona specjalnie dla kobiet maska ma mniejszy rozmiar i pasuje do rysów twarzy kobiet.

Kody produktów

| | Europe 3 |
|-------------------------------------|----------|
| AirFit N20 for Her (dla niej): mała | 63516 |
| AirFit N20: mała | - |
| AirFit N20: średnia | 63517 |
| AirFit N20: duża | 63518 |

Europe 3: angielski, bułgarski, czeski, grecki, węgierski, polski, portugalski, rumuński, hiszpański i turecki

