

Centrala pielęgniarska Vista 120 CMS System monitorowania pacjenta

Łatwy w obsłudze system centralnego monitorowania Vista 120 CMS umożliwia obserwowanie parametrów życiowych do 64 pacjentów, podłączonych do monitorów Vista 120 lub Vista 120 S. Centralne monitorowanie ułatwia pracę lekarzom, jednocześnie znacznie zwiększając bezpieczeństwo pacjentów.

Wbudowana technologia Mirth Connect ułatwia eksport parametrów życiowych i ADT

Elastyczność wyboru: oprogramowanie ze sprzętem lub bez

Integracja i wyświetlanie danych z respiratorów i aparatów do znieczulania Dräger, i z systemów monitorowania pacjenta

Krzywe dynamiczne wyświetlane w czasie rzeczywistym wartości liczbowe parametrów i alarmy dla maksymalnie 64 pacjentów podłączonych do monitorów przyłóżkowych Vista 120 i 120S



Opcje programowe wybierane przez użytkownika:

- Podgląd raportów
- Możliwość przygotowania raportów w PDF i drukowania za pomocą drukarki laserowej
- Opcja Full Disclosure z 96 lub 240 godzin
- Ustawianie alarmów w poszczególnych monitorach i w grupach monitorów

Bezproblemowy dostęp do danych pacjenta przez Web View

Zalety

Łatwa obsługa

Większość funkcji można wykonać w trzech prostych krokach, dzięki czemu przeciążony personel może mieć więcej czasu dla pacjenta.

Dwukierunkowa konfiguracja alarmów

Można konfigurować i wyświetlać w centrali ustawienia alarmów dla każdego monitora przyłóżkowego. Eliminuje to konieczność podchodzenia do każdego monitora w celu zmiany ustawienia alarmów.

Elastyczny eksport raportów

Ułatwieniem pracy personelu medycznego jest możliwość drukowania raportów na drukarkach sieciowych lub zapis ich w formacie PDF.

Obsługa do 64 pacjentów

Ułatwia centralne monitorowanie przez jednoczesne wyświetlanie na dwóch ekranach danych pochodzących z maksymalnie 64 podłączonych monitorów pacjenta.

Bezpieczeństwo sieciowe

Oprogramowanie Vista 120 CMS korzysta z dedykowanej sieci i nie łączy się z siecią zewnętrzną, co pomaga zabezpieczyć dane pacjenta.

Powiązane produkty


D-6829_2014



Vista 120

Szpitala na całym świecie stoją przed wspólnym wyzwaniem: zapewnienia pacjentom jak najlepszej opieki przy ograniczonych możliwościach finansowych i przeciążeniu personelu medycznego. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Dräger oferuje monitor pacjenta Vista 120.

D-13374-2016

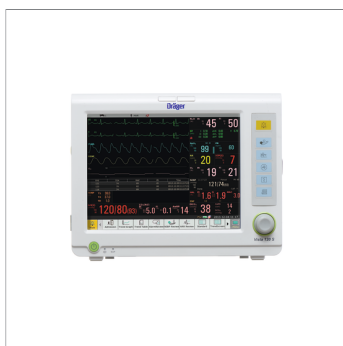

Vista 120 S

Firma Dräger bierze pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na monitory pacjenta z wbudowanym modułem łączności, zapewniające podstawowe monitorowanie w przystępnej cenie. Monitor Vista 120 S przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków, i może być używany samodzielnie lub jako element w pełni zintegrowanego stanowiska pacjenta w połączeniu z urządzeniami do terapii firmy Dräger.

Dane techniczne

Wydajność

Wyświetlane krzywe dynamiczne parametrów życiowych	2 krzywe EKG 1 krzywa RESP 1 krzywa PLETH 3 krzywe IBP 1 krzywa CO ₂ 4 krzywe AG dla CO ₂ , O ₂ , N ₂ O i AA 3 krzywe z z respiratora lub aparatu do znieczulania 1 krzywa BIS
Wyświetlane parametry życiowe	EKG: HR, odchylenie ST, PVC RESP: RR NIBP: SKURCZ, ROZK, ŚRED SpO ₂ : wykres słupkowy SpO ₂ , PR PI, SpO ₂ TEMP: T1, T2, TD IBP: ART, PA, CVP, RAP, ICP, LAP, P1, P2, PPV CO ₂ : etCO ₂ , FiCO ₂ , AwRR AG: etCO ₂ , FiCO ₂ , AwRR; EtO ₂ , FiO ₂ ; EtN ₂ O, FiN ₂ O, HAL/ISO/ENG/SEV/DES:Et, Fi, MAC C.O.: C.O., TB Parametry z respiratora i aparatu do znieczulania : PEEP, PIP, Pmean, AwRR, MV, MVi, VT, VTi, etCO ₂ , FiCO ₂ , EtN ₂ O, Fin ₂ O, EtO ₂ , FiO ₂ , EtAA, FiAA, EtHal, FiHal, EtEnf, FiEnf, EtIso, Filns, EtDes, FiDes, EtSev, FiSev, Mac BIS: BIS, EMG, SQL, SR, SEF, TP, BC
Możliwości oprogramowania	
Przeglądanie trendów	Trendy z 240 godzin dla każdego monitora przyłóżkowego Krótkie trendy z 12 godzin dla każdego monitora przyłóżkowego
Zdarzenia alarmowe	20 000 wydarzeń alarmowych związanych z parametrami życiowymi dla każdego monitora przyłóżkowego (w ciągu 240 godzin)
Rodzaje alarmów	Alarm fizjologiczny Alarm techniczny
Poziomy alarmów	3 poziomy alarmów dźwiękowych i wizualnych
Przechowywanie i przegląd wyników pomiarów NIBP	20 000 pomiarów NIBP dla każdego monitora przyłóżkowego (w ciągu 240 godzin)
Pomiar C.O.	20 000 pomiarów C.O. dla każdego monitora przyłóżkowego (w ciągu 240 godzin)
Zapis zdarzeń	720 zapisów zdarzeń alarmowych zawierających wartości liczbowe parametrów, odcinki krzywych dynamicznych i ST
Pamięć krzywych Full Disclosure	Zapamiętywanie i przeglądanie krzywych dynamicznych z 96 lub 240 godzin
Zdalny dostęp	Dostęp do danych za pomocą technologii webowej w lokalnej sieci szpitala.
Integracja danych	HL7

Zalecana konfiguracja sprzętowa

Komponenty	Wymagania
Stacja robocza PC	Procesor: Intel Core i3 Duo 3,0 GHz lub lepszy Pamięć RAM: 4 GB lub więcej Dysk twardy: 500 GB lub więcej Interfejsy ekranu: 2

Dane techniczne

	Port LAN: 1 lub więcej	
	Port USB: więcej niż jeden	
	System operacyjny:	
	Windows 7 Pro 32/64-bitowy	
	Windows 8 Pro 32/64-bitowy	
	Windows 10 Pro 32/64-bitowy	
Klawiatura	Klawiatura PS/2 lub USB z oznakowaniem CE	
Mysz	Mysz PS/2 lub USB z oznakowaniem CE	
Ekran	Dane techniczne:	
	Wymiary (cale)	Rozdzielczość (w pikselach)
	19 (ekran panoramiczny)	1440 x 900
	19 (ekran standardowy)*	1280 x 1024
	17 (ekran standardowy)	1280 x 1024
	Ilość	Dla 1 do 32 monitorów przyłóżkowych – jeden ekran Dla 33 do 64 monitorów przyłóżkowych – dwa ekrany
Drukarka	LaserJet	
Zasilanie awaryjne	1000 W	
Dane techniczne urządzeń sieciowych	Struktura	Ethernet 802.3
	Urządzenie	Przełącznik sieciowy
	Szybkość transmisji	10 M, 100 M
	Przesyłane dane	Krzywe dynamiczne, wartości liczbowe parametrów i alarmy z wszystkich monitorów przyłóżkowych podłączonych do sieci
	Maksymalna liczba monitorów w sieci	64
Głośnik	Zalecany wbudowany głośnik	
System Kontron	Zgodny	

Dostępność na rynku

Centrala Vista 120 CMS jest dostępna tylko na wybranych rynkach.

Aby sprawdzić dostępność produktu w swoim regionie, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dräger.

* Opcja zalecana

Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy
www.draeger.com

POLSKA
Dräger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa
Tel. +48 691-100-550
info.polska@draeger.com

Producent:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lubeka, Niemcy

Znajdź lokalnego
przedstawiciela
handlowego na stronie:
www.draeger.com/kontakt

