



• opcjonalne akcesoria

## Cechy

- Krzesło FAST (nr do zamówienia 60-4120-001) może być używane jako krzesło schodowe, krzesło ewakuacyjne lub krzesło transportowe
- Opcjonalnie można zastosować plastikowy system siedziska i oparcia MOD 65-4100-109
- System gąsienic można łatwo przymocować lub odłączyć od krzesła (aby zminimalizować ciężar przenoszony przez operatora)
- Anodyzowana aluminiowa rama jest przystosowana do obsługi pacjentów o wadze 250 kg
- Dwa przednie koła obrotowe 12,5 cm i dwa tylne koła stałe 15 cm z blokadami
- W zestawie podparcie głowy i trzy pasy bezpieczeństwa
- Tylny górny uchwyt jest wysuwany i regulowany w czterech położeniach (od 100 do 158 cm)
- Przednie uchwyty teleskopowe regulowane w pięciu położeniach (maksymalne przedłużenie 34 cm)
- Winyłowy materiał jest łatwy do czyszczenia lub wymiany
- Opcjonalnie dostępny jest wygodny podnózek, 4-punktowy pas bezpieczeństwa, kosz siatkowy, tylne uchwyty i system bezpiecznego mocowania SLM
- W opcji dostępne elektryczne gąsienice POWERTRAXX umożliwiające bezwysiłkowy wjazd i zjazd po schodach 60-4130-001

## Specyfikacje

Wys. min.	Szer. całk.	Dług. całk.	Szer. siedziska	Dł. i szer. po złożeniu	Waga bez gąsienic	Waga z gąsienicami	Limit obciążenia
100 cm	51,6 cm	69,5 cm	41,5 cm	100x51,6x21,5 cm	11,2 kg	15,0 kg	250 kg

## Akcesoria

Mocowanie na ścianie krzesła FAST - zaprojektowane do bezpiecznego mocowania krzesła FAST zarówno w zastosowaniu statycznym, jak i dynamicznym. Zwalnianie jedną ręką pozwala na szybkie zamocowanie lub zwolnienie krzesła.

nr 60-4190-001



4-punktowe pasy dla zwiększonego bezpieczeństwa

nr 62-4400-001



Zestaw plastikowego siedziska krzesła FAST

nr 65-4100-109



Tyłne uchwyty dostarczają dodatkowych punktów podparcia dla operatora, gdy podnosi on krzesło lub manewruje nad przeszkodami.

nr 65-4122-001



Komfortowy podnóżek zwiększa komfort i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

nr 65-4130-001



Podparcie głowy - w zestawie, bez dopłaty

nr 65-4126-001




Składane podłokietniki dla lepszego komfortu.

nr 65-4128-001  
nr 60-4120-001/H/F/A



Podnóżek - w zestawie, bez dopłaty

nr 65-0209-002

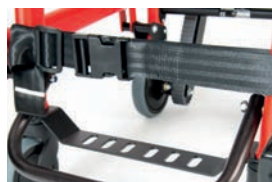

Siatkowy kosz na akcesoria, takie jak butla tlenowa.

nr 65-4123-001



Manualny układ gąsienicowy do krzesła zakupionego bez gąsienic.

nr 65-0402-001



Powertraxx FAST - inteligentny system gąsienicowy zasilany akumulatorem, który przenosi w górę lub w dół schodów obciążenia do 227 kg bez konieczności przenoszenia i podnoszenia krzesła, w którym naładowany akumulator wystarcza na pokonanie 20 biegów schodów. Krzesło jest łatwe w obsłudze podczas transportu w górę i w dół schodów, a intuicyjne, łatwe w użyciu elementy sterownicze w stylu łopatek pozwalają zachować poczucie kontroli.

nr 65-0403-001  
nr 60-4130-001



Krzesło FAST zostało zaprojektowane tak, aby spełniać i przewyższać międzynarodowe normy, takie jak EN 1865-4:2012.

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl  
 Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.  
 Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

