


**OPIS PRODUKTU:**

Ponieważ odleżyna może rozwinąć się w czasie krótszym niż jedna godzina, bądź gotów na natychmiastową reakcję dzięki hybrydowemu materacowi Syntheto.

ISTOTNE INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Materac hybrydowy zapewnia komfort pianki i wydajność dynamicznej terapii powietrznej wtedy, kiedy jest to potrzebne. Mobilizacja wspiera prewencję odleżyn, dlatego materac Syntheto wyposażono w funkcje przechyłów bocznych oraz przypomnienia o konieczności wykonania obrotu ciała pacjenta.
- Zaawansowane, zintegrowane funkcje, takie jak bezdotykowe ciągłe monitorowanie częstości pracy serca i oddechów, możliwość wysyłania danych klinicznych z materaca, powiadomienia i przypomnienia, wtedy kiedy i gdzie ich potrzebujesz. Wszystko to sprawia, że materac, oferując więcej pozwala Ci bardziej skupić się na opiece nad pacjentem.

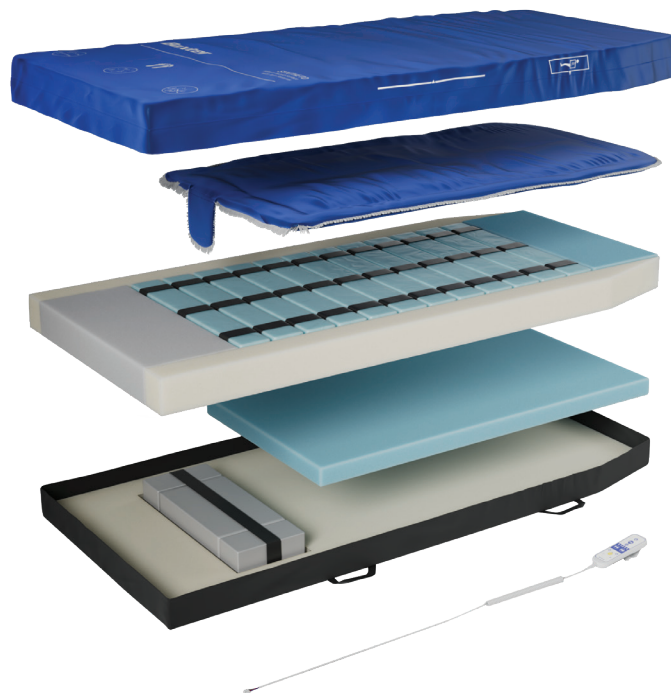

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Odleżyny od 1 do 4 stopnia
- Pokrowiec grzewany ultradźwiękowo
- Tryby Mobilizacji oraz Terapia Boczna Odleżyn pozwalają osiągnąć maksymalny kąt 30° w czasie krótszym niż 35 sekund dla pacjenta o masie ciała poniżej 140 kg
- Tryb zmiennego ciśnienia - czas cyklu: 11 minut
- Średnia wydajność parowania 30 HoB, 52,6 (g/sqm-hr)
Średni suchy przepływ 30 HOB: 11,9 (W/m2)
dotyczy: zaawansowana technologia Microclimate®
- Poliuretan pokryty powłoką poliestrową, niski współczynnik tarcia, oddychający, bakteriostatyczny, grzybobójczy i przeciwbakteryjny. Można czyścić i prać

SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	WYSOKOŚĆ	MASA CIAŁA PACJENTA	WAGA MATERACA
92 cm	195 cm	23 cm	40 – 185 kg	Maks. 26 kg

KORZYŚCI:

- Zintegrowana pompa umożliwia subtelny i elastyczny pracę komór powietrznych, dostosowaną do potrzeb pacjenta i stanu jego skóry. Funkcje są uruchamiane przez naciśnięcie przycisku na zewnętrznym pilocie, co zapobiega przypadkowemu rozszczelnieniu układu oraz nie powiększa obrysu łóżka.
- W trybie zmiennego ciśnienia komory naprzemiennie napełniają się i opróżniają, co pozwala na delikatne repozycjonowanie pacjenta na materacu oraz zmianę nacisku na tkanki ciała.
- Terapia zarządzania mikroklimatem skutecznie usuwa nadmiar ciepła i wilgoci ze skóry pacjenta, zwłaszcza w okolicy krzyżowej, gdzie odleżyny rozwijają się najczęściej.
- Tryb Mobilizacji Pacjenta usprawnia obracanie pacjenta i pomaga odciążać personel podczas zmiany pościeli lub opatrunku.
- Tryb Odleżyny umożliwia rotowanie ciała pacjenta, redukując nacisk w okolicy krzyżowej.
- Kieszonka na kasetę RTG ułatwia obsługę technikom radiologii i skraca czas wykonywania przyłóżkowych zdjęć RTG.
- Alarm wyjścia pacjenta z łóżka automatycznie wykrywa, kiedy pacjent opuszcza materac.
- Bezdotkowy system ciągłego monitorowania jest drugą „parą oczu” uzupełniającą punktowe i ciągłe pomiary parametrów życiowych. Dzięki temu opiekun otrzymuje ostrzeżenia, kiedy częstość pracy serca i oddechu przekracza określoną wartość graniczną.
- Inteligentny, konektywny materac pozwala zdalnie przesyłać powiadomienia i przypomnienia oraz dane o aktualnym stanie i trybie pracy.



W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. 02-862 Warszawa; ul. Farbiarska 47; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli.
Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.

