


ENTHERMO® III

Elektroniczny irygator ciepłą wodą

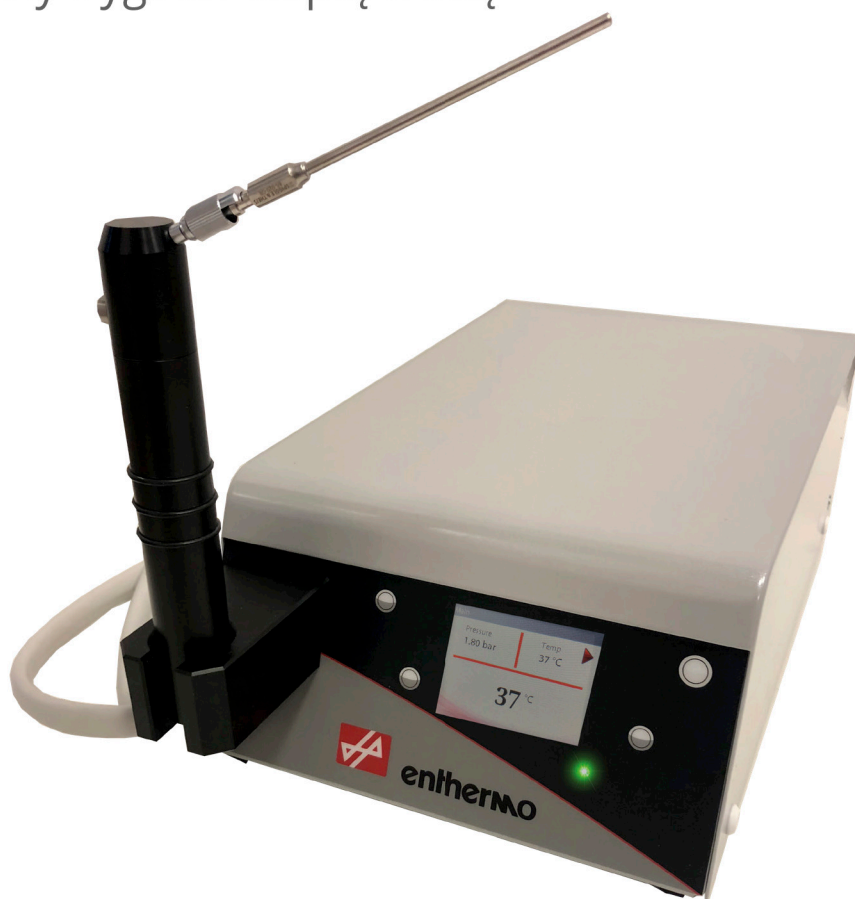

ENTHERMO® III może być używane do badań kalorycznych lub do płukania (czyszczenia) ucha. Posiada trzy ustawienia temperatury (30°C, 37°C, 44°C) oraz przepływ wody 300ml na minutę. Ustawiona temperatura jest wyświetlana na wyświetlaczu urządzenia. Ciśnienie wody można kontrolować za pomocą przycisku na rękojeści urządzenia. Zestaw zawiera 2 kaniule bagnetową i prostą, wąż wlotowy do podłączenia do instalacji wodnej o minimalnym ciśnieniu wody 2 bary oraz wąż wylotowy do podłączenia do instalacji kanalizacyjnej.

System ciągłego przepływu, aby zapobiec
rozwojowi bakterii w wodzie

Dystrybucja i serwis w Polsce:

 **ronest**
aparatura medyczna & instrumenty

Korzyści (w skrócie)

- Dokładna elektroniczna kontrola temperatury
- Trzy ustawienia temperatury
- Ciągły przepływ wody, aby zapobiec rozwojowi bakterii
- Regulacja ciśnienia za pomocą przycisku na rękojeści
- Kontrola przegrzania
- W zestawie z kaniulami: prostą i bagnetową
- Nadaje się do stymulacji kalorycznej i płukania uszu
- Gotowy do użycia w ciągu 60 sekund po włączeniu
- Wskaźnik LED wyświetla stan urządzenia
- Bezpieczny i niezawodny
- Kompaktowa konstrukcja



XX



Kaniula prosta i kaniula bagnetowa

Specyfikacja techniczna

Typ (według IEC 60601-1)	B
Klasyfikacja (według IEC 60601-1)	I
Klasyfikacja (według 93/42/EEG)	Ila
Klasa	IP22
Napięcie zasilania	230 V A/C - 50 Hz
Maksymalny pobór mocy	1100 W
Ustawienia temperatury	30°C, 37°C, 44°C
Maksymalne ciśnienie wody zasilającej	6.0 bar
Minimalne ciśnienie wody	2.0 bar
Robocze ciśnienie wody	1.8 bar
Waga	3 kg

Product code: 844080 / III
ENTHERMO® III
 Electronic warm water irrigator

Dystrybucja i serwis w Polsce:

ronest
 aparatura medyczna & instrumenty