



i2

Defibrillator/Monitor



Amoul[®]
We Innovate to Save Lives

4 w 1

Defibrylator i2 posiada cztery tryby pracy: defibrylacja, monitorowanie, stymulacja oraz AED. Dzięki temu urządzenie spełnia różnorodne wymagania w różnych sytuacjach, zarówno w szpitalu, jak i poza nim.

To wszechstronne urządzenie nadaje się do stosowania w transporcie medycznym, karetkach pogotowia, SORach, kardiologii, na oddziałach intensywnej terapii oraz w anestezjologii i blokach operacyjnych.



Defibrylacja w 3 krokach



1. Wybierz żądany poziom energii

2. Naciśnij przycisk **ładowania**

3. Naciśnij przycisk **"Shock"** aby podać impuls



Ambu Tryb RKO

Wizualne i dźwiękowe wskazówki dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej są zgodne z najnowszymi wytycznymi AHA i ERC



Kompaktowość

Kompaktowy, lekki (5,8 kg), łatwy do przenoszenia jedną ręką



Kategorie Pacjentów

Dorośli, dzieci, niemowlęta



Zewnętrzne łyżki defibrylujące



Elektrody AED



EKG



7" kolorowy ekran
Intuicyjny i przyjazny dla
użytkownika interfejs,
ułatwiający odczytywanie
informacji o pacjencie w
każdyh warunkach

Tryb AED




Tryb ten zapewnia podanie impulsu
ratującego życie w ciągu kilku sekund,
zgodnie z jasnymi wskazówkami głosowymi i
wyświetlanymi na ekranie.

Monitorowania wielu parametrów



3 krzywe, 3/5-odprowadzeniowe EKG
oraz zapis zdarzeń

Defibrylacja ręczna

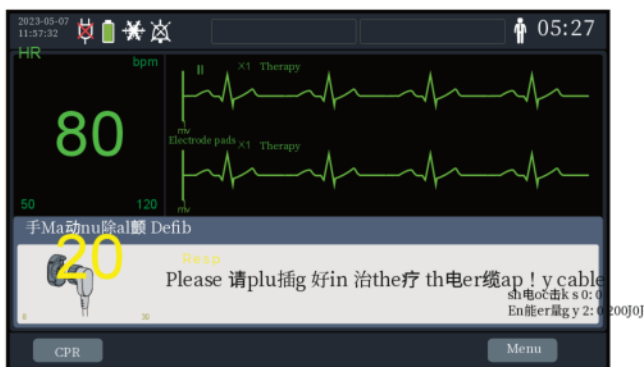

Obejmuje tryb pracy asynchronicznej i
synchronicznej.

Stymulacja



2 oferuje tryb stały oraz tryb na żądanie z
regulowaną częstotliwością stymulacji i mocą.



Łatwy transport

Uchwyt na poręcz łóżka



Uchwyt do przenoszenia



Ochronna torba transportowa



CE 2797 EN1789

Wszystko, co niezbędne do ratowania życia

Ten model to optymalnie skonfigurowane narzędzie, wyposażone w uniwersalne akcesoria dopasowane do standardowych procedur ratunkowych. Idealny wybór tam, gdzie liczy się niezawodność i prostota obsługi bez konieczności dobierania skomplikowanego oprzyrządowania.



Amortyzujący uchwyt i dwuwarstwowy ekran wytrzymują silne uderzenia i upadki. Stopień ochrony IP54 sprawia, że defibrylator nadaje się do użytku w nagłych wypadkach, SORach, karetkach i poza szpitalem.



Zasilanie sieciowe i bateryjne zapewnia nieprzerwane, długotrwałe wsparcie. Akumulator zapewnia do 5 godzin monitorowania. Czas ładowania akumulatora wynosi mniej niż 3 godziny.

Ogólne	Opis
Rozmiar	290x205x297mm (L/W/H)
Waga	5.8kg (z baterią)
Zasilanie	AC:100-240V,50/60 Hz; Akumulator: akumulator litowo-jonowy
Defibrylacja	Opis
Przebieg	Dwufazowy, fala wykładnicza o ściętych końcach (BTE) z kompensacją impedancji
Zakres impedancji	25 Ω ~ 200 Ω (defibrylacja zewnętrzna)
Wybór energii	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 300 i 360 J
Czas ładowania impulsu	Osiągnięcie 200 J w mniej niż 5 sekund przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora; Osiągnięcie 360 J w mniej niż 8 sekund przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora;
	Tryb ręczny: defibrylacja asynchroniczna i synchroniczna; tryb AED
Stymulacja nieinwazyjna	Opis
Tryby	Tryb stały i na żądanie
Kształt fali	Jednofazowy impuls prostokątny
Częstotliwość	Częstotliwość: 40ppm ~ 170ppm $\pm$ 1.5%
Monitorowanie	Opis
Monitorowane parametry	3 krzywe, 3/5-odprowadzeniowe EKG oraz zapis zdarzeń
Komunikacja	Opis
Standard	WIFI, USB

Global Markets



Amouli® Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.



AMKO-MED SP. Z O.O.

ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław

Tel: +48 605 308 926

E-Mail: kontakt@amko-med.pl

WEB: www.amko-med.pl