


ŁÓŻKO SZPITALNE **FALCON**

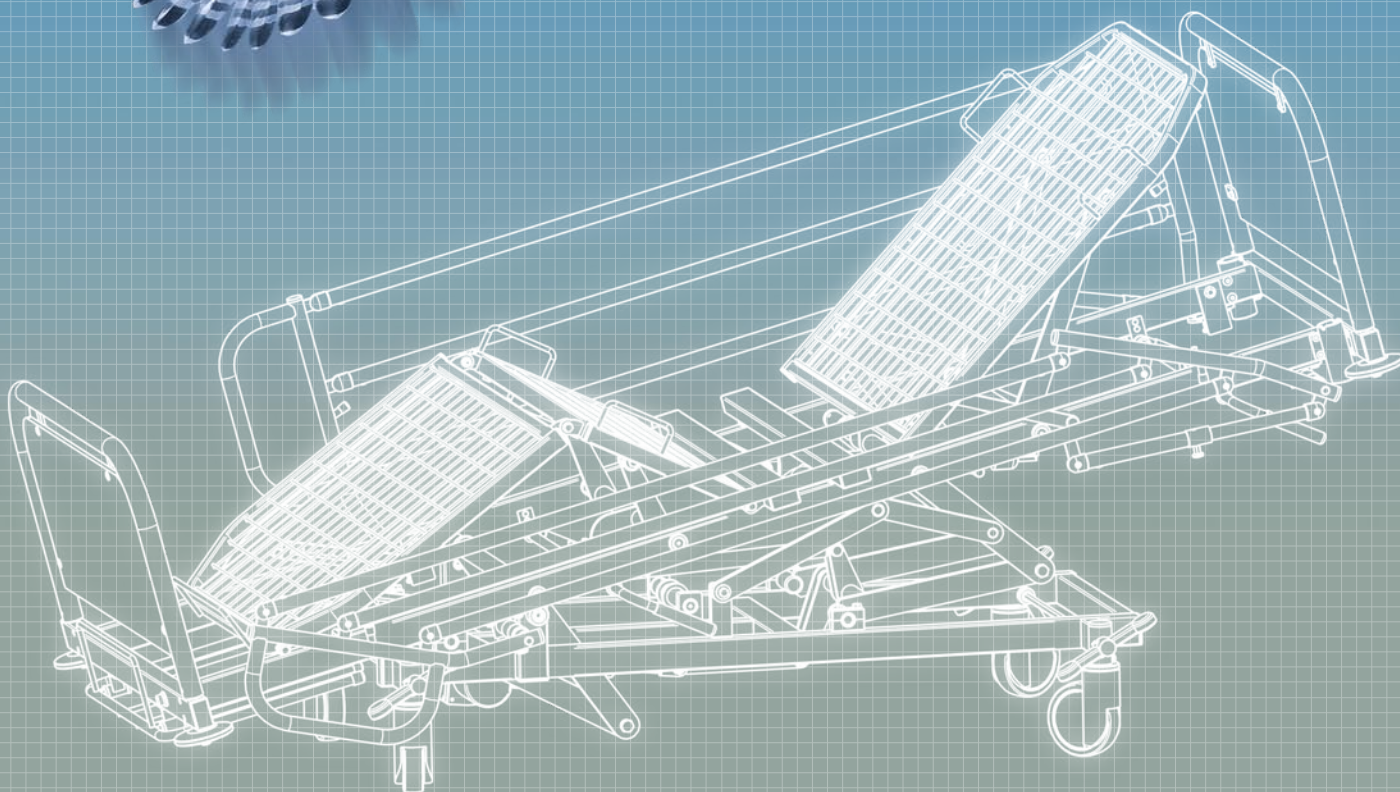

Łóżko **FALCON** jest łóżkiem wielofunkcyjnym przeznaczonym do pielęgnacji, leczenia, diagnozowania oraz monitorowania pacjenta. Łóżko to stanowi podstawowe wyposażenie oddziałów kardiologicznych, neurochirurgicznych, intensywnej opieki medycznej oraz rehabilitacyjnych. Łóżko **FALCON** zostało stworzone w odpowiedzi na rosnące wymagania stawiane tego typu urządzeniom, zaprojektowane przy współudziale personelu me-

dycznego szpitali i klinik oraz samych pacjentów. Rodzina łóżek **FALCON** spełnia oczekiwania personelu medycznego w zakresie obsługi a dla pacjenta wygody użytkowania. Zróżnicowana funkcjonalność łóżka (wersja z napędem elektrycznym oraz mechanicznym) oraz bogate wyposażenie dodatkowe w połączeniu z atrakcyjnym designem pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dzisiejszej wiedzy z zakresu leczenia pacjentów.

Budowa łóżka


- konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym
- leże 4 segmentowe
- segmenty leża wypełnione odejmowanymi siatkami metalowymi
- krążki odbojowe
- szczyty lakierowane, wyjmowane z wypełnieniem z płyty HPL

Funkcje łóżka


- elektryczna wersja łóżka - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, kąta nachylenia segmentu uda, wysokości leża i funkcja autokontur realizowane przy pomocy siłowników elektrycznych sterowanych pilotem przewodowym z blokadą funkcji
- mechaniczna wersja łóżka - regulacja kąta nachylenia oparcia pleców, kąta nachylenia segmentu uda realizowane przy pomocy sprężyn gazowych, wysokości leża przy pomocy pompy hydraulicznej
- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana ręcznie, przy pomocy sprężyny gazowej
- regulacja kąta nachylenia segmentu podudzia realizowana ręcznie, przy pomocy mechanizmu zapadkowego
- funkcja autokontur (jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i nóg) - w wersji elektrycznej łóżka
- autoregresja w segmencie oparcia pleców (system zapobiegający zakleszczaniu ubrania pacjenta podczas regulacji segmentu oparcia pleców)
- funkcja CPR w segmencie oparcia pleców (szybkie opuszczenie segmentu leża do poziomu)
- układ jezdny z centralnym systemem blokowania kół oraz kołem kierunkowym

Opcje wykonania

- konstrukcja łóżka wykonana ze stali nierdzewnej
- segmenty leża wypełnione płytą HPL przezierną dla promieni RTG lub tworzywowymi panelami
- panel sterujący dla personelu z możliwością blokowania elektrycznych funkcji łóżka
- układ elektryczny wyposażony w akumulator
- przedłużanie leża o 200mm
- wysuwana półka na pościel
- szczyty chromowane, nierdzewne lub wykonane z tworzywa ABS lub wytłoczki tworzywowej
- szczyty z wyjmowanymi wypełnieniami z płyty HPL
- tworzywowa osłona podwozia
- listwy ochronne wzdłuż leża łóżka
- funkcja CPR w segmencie uda
- poziomice na ramie leża
- indywidualna blokada kół
- dwuosiowe krążki odbojowe

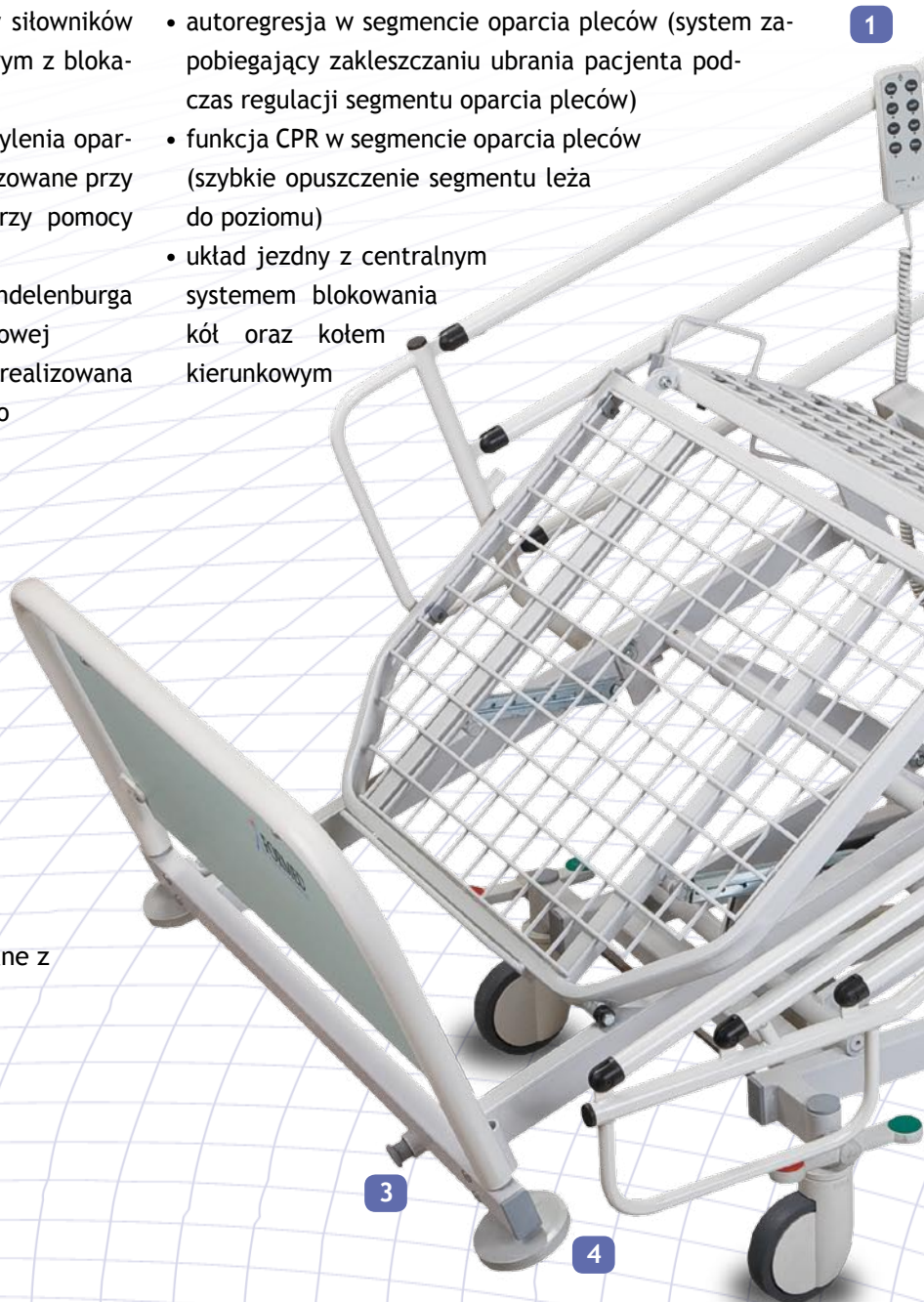

- 1 Pilot przewodowy
- 2 Odejmovany szczyt łóżka
- 3 Przycisk uruchamiający funkcje Trendelenburga i anty- Trendelenburga
- 4 Krążek odbojowy
- 5 Dźwignia centralnej blokady kół
- 6 Poręcz boczna składana

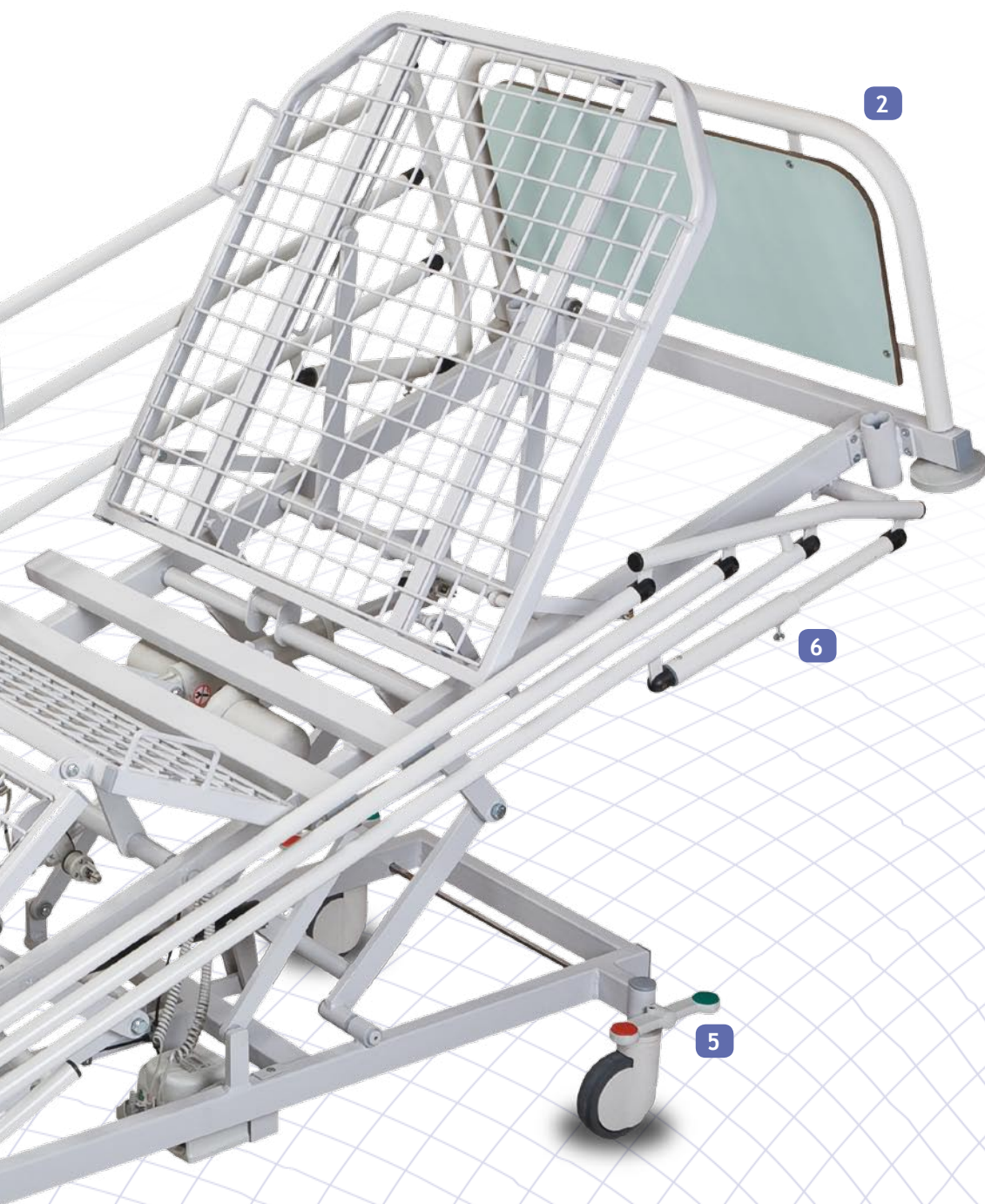

Minimalna wysokość leża



Maksymalna wysokość leża



Półka na pościel



Funkcja autoregresji



Materac przeciwdleżynowy pasywny



wyjmowane wypełnienie segmentów leża



Pozycja anty-Trendelenburga



Pozycja Trendelenburga



Pozycja Fowlera



Regulacja segmentów leża

Wersja leża		Segment oparcia pleców	Segment uda	Segment podudzia
Łóżko z hydrauliczną regulacją wysokości	Wypełnienie leża	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka
		Płyta HPL	Płyta HPL	Płyta HPL
		Płyta HPL	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka
		Płyta HPL	Panel tworzywowy	Panel tworzywowy
		Panel tworzywowy	Panel tworzywowy	Panel tworzywowy
	Regulacja leża	Sprężyna gazowa	Sprężyna gazowa	Mechanizm zapadkowy
		Sprężyna gazowa	Sprężyna gazowa	Mechanizm typu raster
Łóżko z elektryczną regulacją wysokości	Wypełnienie leża	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka
		Płyta HPL	Płyta HPL	Płyta HPL
		Płyta HPL	Wyjmowana siatka	Wyjmowana siatka
		Płyta HPL	Panel tworzywowy	Panel tworzywowy
		Panel tworzywowy	Panel tworzywowy	Panel tworzywowy
	Regulacja leża	elektryczna	elektryczna	Mechanizm zapadkowy
		elektryczna	elektryczna	Mechanizm typu raster

Dane techniczne

Całkowita długość	2180 mm
Całkowita szerokość	960 mm
Długość leża	2000 mm
Szerokość leża	850 mm
Wysokość maks. leża bez materaca	820 mm
Wysokość min. leża bez materaca	395 mm
Maksymalny kąt przechyłu Trendelenburga	17°
Maksymalny kąt anty-Trendelenburga	18°
Długość segmentu oparcia pleców	805 mm
Długość segmentu stałego	225 mm
Długość segmentu uda	345 mm
Długość segmentu podudzia	625 mm
Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców	0° - 74°
Kąt pochylenia segmentu uda	0° - 40°
Kąt pochylenia segmentu podudzia	0° - 22°
Autoregresja oparcia pleców	110 mm
Średnica kół jezdnych	125mm

Zastrzega się możliwość modyfikacji wyrobu w wyniku postępu technicznego oraz indywidualnych wymagań klienta

Standardowa kolorystyka płyt HPL (wypełnienie szczytów i leża)

K106 Biały	U515 Beżowy	U121 Niebieski	U125 Granatowy
U8846 Seledynowy	U8841 Turkus	U8831 Szary	D-381 Buk

Kolory prezentowane w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości z przyczyn drukarsko-technicznych.

Elementy metalowe łóżka pokryte są standardowo lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035 odpornym na uszkodzenia mechaniczne i dezynfekcję łóżka. Możliwe jest pomalowanie elementów łóżka na dowolny kolor z palety RAL.

Możliwe wyposażenie łóżka

materac szpitalny w pokrowcu bawełnianym
materac szpitalny w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym
materac przeciwośluzowy pasywny
podpórka ręki
poręcz boczna składana (lakierowana, chromowana lub ze stali nierdzewnej)
wieszak kroplówki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt ręki (lakierowany, chromowany lub ze stali nierdzewnej)
uchwyt na kaczkę
uchwyt na basen
uchwyt na woreczki fizjologiczne
podwójna rama wyciągowa
półka na pościel
ramka na kartę gorączkową
tabliczka imienna pacjenta
uniwersalny uchwyt na wyposażenie dodatkowe
półka (pod aparaturę, do pisania)

przedstawiciel regionalny

Producent:
FORMED-PRO Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec

Dystrybutor generalny:
FORMED Sp. z o.o. Sp. k.
34-300 Żywiec
Al. Legionów 21 A
tel. 33 819 45 94
fax 33 819 46 21
e-mail: formed@formed.eu.pl
www.formed.eu.pl



Wyrób medyczny spełnia wymogi bezpieczeństwa zgodnie z Dyrektywą Europejską 93/42/EEC oraz Ustawą o wyrobach medycznych