

MODULAR TABLE SYSTEM



technika KOCHERA-LANGENBECK

- możliwość trakcji szkieletowej kości udowej z przytrzymaniem stopy
- noga może być stabilizowana pod wymaganym kątem
- poduszki piersiowe umożliwiają odbarczenie jamy brzusznej w pozycji leżącej

obrazowanie modułowe - nieograniczone możliwości korzystania z ramienia C

lokalizacja ciała obcego
obrazowanie stawu
mielografia
chirurgia naczyniowa

wszczepianie rozrusznika
lokalizacja bronchografii
angiografia serca
przednia chirurgia szyjna

umieszczanie cewnika
chirurgia GU
obrazowanie rentgenowskie
kontrola biału

zupelna przezierność

- pełna integracja z ramieniem C
- przednia, tylna, boczna i skośna
- możliwość pozycjonowania blatu
- przezierność blatu i szyn bocznych

poszerzenie rotacji

25° obrót planekki bocznej
w obu kierunkach

elastyczne zastosowanie

pełne wspomaganie ciała
pozwała na elastyczne
możliwości zabiegów

rama WILSON

- ten opcjonalny dodatek oferuje przezierność w 360°
- pacjent może być pozycjonowany dla operacji dysku, laminectomii oraz dekompresji

pełne pozycjonowanie

pozycjonowanie tylne,
boczne i przednie

trzystopniowa fiksacja

- maksymalizacja kontroli dla stopowej końcowej trakcji
- mechanizm zdalnie regulowany umożliwia boczna trakcję

wyciąg biodra


- regulowany wyciąg biodrowy dla precyzyjnego kąta zgięcia regulowanego i pozycji przedniej i tylnej

słupek boczny kroczy

- regulowany boczny wałek oporowy krocza
- mechanizm regulacji może zwiększyć lub zmniejszyć przyczepność boczna biodra pacjenta
- możliwość obrazowania miednicy bez przeszkód

pozycjonowanie słupka

- lepsze i gorsze pozycjonowanie na wznak przez zdejmowany wałek oporowy krocza
- zdalne kierowanie umożliwia regulację boczna śródoperacyjna poprawa rozproszenia główki
- kości udowej kiedy trakcja słupka nie jest pożądana

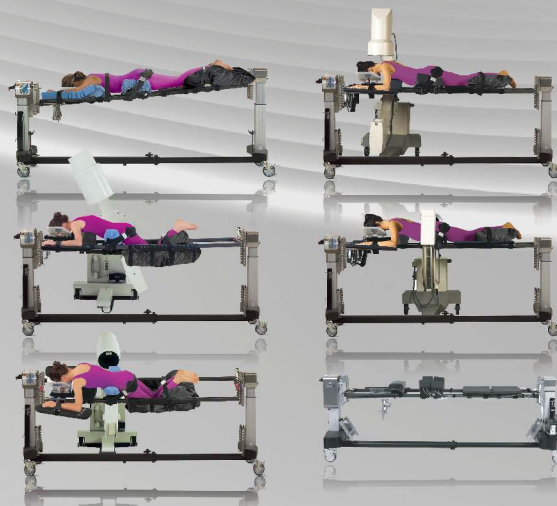

całkowita przezierność

- całkowita przezierność ramy i materaca
- nieograniczona kompatybilność z ramieniem C
- umożliwia przedni, tylny, boczny i skośny wgląd śródoperacyjny
- umożliwia inne procedury fluoroskopowe

minimalizacja utraty krwi

- zmniejsza kompresję głównej żyły dolnej
- zmniejsza krwawienie żyłne zewnątrzoponowego
- znacznie poprawia wizualizację

system kontroli materaca

- usprawnia zespół operacyjny przez ręczną stymulację punktów nacisku
- zapewnia automatycznie okresowe działania masażu
- stymuluje biodra i uda poprzez punkty nacisku w czasie operacji
- zwiększa komfort i bezpieczeństwo pacjenta

optymalne pozycjonowanie

- dostosowane klocki wsparcia poprawiają pozycjonowanie pacjenta i są zbudowane z przeziernego kompozytu węglowego
- zaawansowana kontrola klocków poprzez system Tempur-Pedic - technologii polepszenia komfortu i bezpieczeństwa pacjenta

360-stopniowa rotacja

- umożliwia bezpieczne i efektywne obracanie pacjenta
- szybka rotacja pozioma w leżącej pozycji przedniej lub tylnej
- pozwala na wyjątkowe, wielopłaszczyznowe, śródoperacyjne obrazowanie kręgosłupa i miednicy



www.youtube.com/watch?v=5gcd8oB216U
www.youtube.com/watch?v=Bwi0i1E1bpl

Stół ortopedyczny Trauma jest częścią systemu stołu OZI Mizuho Modular, który dostarcza kompletne zasilanie, łatwe pozycjonowanie pacjenta i zapewnia możliwości wyciągu skórno lub szkieletowego podczas kluczowych procedur pourazowych.

pozycjonowanie słupka

- lepsze i gorsze pozycjonowanie na wznak przez zdejmowany wałek oporowy krocza
- zdalne kierowanie umożliwia regulację boczna śródoperacyjna poprawa rozproszenia główki
- kości udowej kiedy trakcja słupka nie jest pożądana

zastosowanie

- przypinanie biodra
- IM Gwoździarka kości udowej w pozycji leżącej lub bocznej
- IM Gwoździarka piszczeli



maksymalna przezierność

- przezierność blatu
- umożliwione obrazowanie kończyn pod różnymi kątami

anatomiczna poprawna trakcja

- kompatybilny z ramieniem C
- wyeliminowanie potrzeby obsługi pedałem

podwójna kolumna poprawiająca stabilność

poprawa stabilności pacjenta
oraz lepsza kompatybilność
z ramieniem C

lekka konstrukcja

- węglowa konstrukcja zwiększa wytrzymałość oraz zmniejsza masę
- sterowane kółka ułatwiają transport

kontrola

zastosowanie kontrolera
ręcznego umożliwia zmianę
wysokości oraz
pozycjonowanie

pojemnik na akcesoria

zaprojektowany do
przechowywania akcesoriów
łatwy transfer trakcji Arc na stół



Technologia modułowa Base

- wszechstronność możliwości leczenia urazów
- maksymalny dostęp
- możliwość pozycjonowania bez przemieszczania pacjenta

RADIOLOGIC
SURGERY TOP

POZYCJONOWANIE W CHIRURGII KRĘGOWEJ

SPINAL
SURGERY TOP

POZYCJONOWANIE W CHIRURGII KRĘGOWEJ

ORTOPEDIC
TRAUMA TOP

DLA KOMPLETNYCH PROCEDUR ORTOPEDYCZNYCH