

H-Scribe

HOLTER EKG DLA KLINIKI I GABINETU - ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO



CHARAKTERYSTKA PRODUKTU

- **Wszechstronne rozwiązania dla badań holterowskich**

H-Scribe™ jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla prywatnego gabinetu, jak i dla szpitala o wielu oddziałach, jest przydatny wszędzie tam, gdzie potrzebne są 3- lub 12-kanalowe systemy pracujące jako pojedyncze stacje diagnostyczne lub wielostanowiskowe systemy sieciowe wyposażonych w opcjonalne interfejsy wymiany danych.

- **Różne Opcje Skanowania**

Program pracuje w trybie skanowania retrospektywnego, prospektywnego i nakładania zespołów, co umożliwia korzystanie zarówno z tradycyjnych, jak i zaawansowanych metod analizy.

- **Zaawansowane algorytm VERITAS™ Analizy EKG**


Zaawansowany algorytm VERITAS przetwarzania sygnałów firmy Mortara zapewnia najwyższą dokładność detekcji pobudzeń serca, ich klasyfikowanie oraz eliminację zakłóceń, co zapewnia poprawną identyfikację zdarzeń oraz szybkie skanowanie zapisów.

- **Rozwiązania Sieciowe**

Opcjonalnym rozwiązaniem jest możliwość wczytywanie i przeglądanie w sieci lokalnej badań holterowskich dla nieograniczonej liczby dodatkowych stanowisk lub przesyłanie badań poprzez intranet/internet przy wykorzystaniu usługi Mortara H-Scribe Web Upload. Dostosowane do potrzeb użytkownika elektroniczne raporty końcowe mogą być eksportowane do dowolnego miejsca w sieci.

- **Dwukierunkowe Interfejsy HL7 i DICOM®**

Automatyczne wyczytywanie z systemu HIS danych demograficznych i zleceń, wysyłanie komunikatów statusu/płatności oraz generowanie reportów przy wykorzystaniu list roboczych H-Scribe.

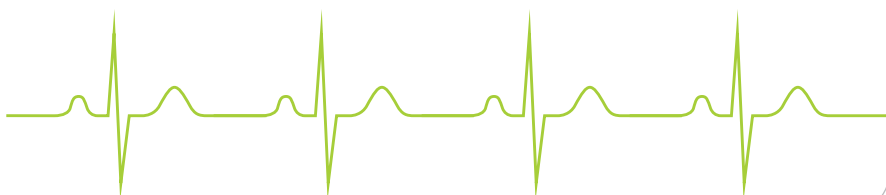

MORTARA INSTRUMENT, INC.

7865 North 86th Street
Milwaukee, WI 53224
U.S.A.

Tel: 414.354.1600
Tel: 800.231.7437
Service: 888.MORTARA
Fax: 414.354.4760

MORTARA RANGONI EUROPE, SRL

(European Headquarters)
Via Cimarosa 103/105
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel: +39.051.298.7811
Fax: +39.051.613.3582

www.mortara.com

ISO 13485 CERTIFIED

GWARANCJA + SERWIS

Firma Mortara Instrument zapewnia najwyższy poziom wsparcia klienta. Prosimy o kontakt w celu wybrania optymalnego programu opieki serwisowej.


DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:

02-884 Warszawa, ul. Puławska 538
Tel: +48 (22) 644-80-62
Fax: +48 (22) 644-81-89
e-mail: mds@e-mds.pl
<http://www.e-mds.pl>

SYSTEM HOLTEROWSKI H-SCRIBE™

FUNKCJA/CECHA	SPECYFIKACJA*
CPU	Komputer klasy Pentium
SYSTEM OPERACYJNY	Microsoft® Windows™
MONITOR	Płaski monitor kolorowy 24" o rozdzielczości 1900 x 1200
TRYBY ANALIZY	Automatyczne skanowanie w trybie retrospektywnym, prospektywnym i nakładania zespołów, przeglądanie zdarzeń, przeglądanie wzorców i tryb stronicowania. Indywidualny profil użytkownika pozwala skonfigurować system wg własnych preferencji.
GRAFICZNA PREZENTACJA TRENDÓW	HR, odstępów RR, zmienności RR, odcinka ST z 12-odprowadzeń, pobudzeń SVPB, VPB
KLASYFIKACJA POBUDZEŃ	Normalne, komorowe, wystymulowane, nadkomorowe, typu R na T, artefakty, pobudzenia znakowane kolorem
ANALIZA RYTMU	Tachykardia/bradykardia, min/maks. częstość rytmu, komorowe pojedyncze, pary i częstoskurcze (najdłuższe i najszybsze); nadkomorowe pojedyncze, pary i częstoskurcze (najdłuższe i najszybsze), migotanie przedsionków (procentowo na godzinę i zsumowane); pauzy; najdłuższy odstęp RR; odchylenie standardowe RR; analiza HRV w dziedzinie czasu
POMIARY ODCINKA ST	Pomiary odcinka ST dla 3 lub 12 odprowadzeń, maks. obniżenie ST, maks. uniesienie ST, trendy 3 lub 12-kanalowe
ANALIZA STYMULATORÓW	Detekcja stymulatora przedsionkowego, komorowego i dwujamowego, błędy stymulacji, zbyt niska lub zbyt wysoka czułość
ZNACZNIKI PACJENTA	Możliwość konfigurowania etykiet dla znaczników pacjenta z automatycznym zatrzymywaniem w czasie skanowania
OPCJE RAPORTU	Dane pacjenta; kryteria skanowania (przedwczesność SVPB, uniesienie/obniżenie ST, wydłużone RR/pauza); podsumowanie statystyczne w postaci tabelarycznej lub opisowej; profile 24-godzinne, strony z trendami, wzorce raportów; wstęgi uzyskiwane ręcznie lub automatycznie; pełna prezentacja; skrócone komentarze definiowane przez użytkownika
WCZYTYWANIE DANYCH	Wczytywanie poprzez USB (Mortara H3+™) i z cyfrowej karty typu compact flash (Mortara H-12 i H12+™)
CZAS WCZYTYWANIA/ANALIZY	Okolo 90 sekund dla rejestracji 24-godzinnej
PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA	Liczba pełnych rejestracji zależna od pojemności twardego dysku, typowo 100
ARCHIWIZACJA PEŁNYCH REJESTRACJI	Płyta DVD+/-RW, płyta CD-RW lub dowolny napęd
EKSPORT RAPORTU KOŃCOWEGO	Opcjonalny eksport w formatach PDF i XML
ZASILANIE	100-240 VAC przy 50/60 Hz

*Specyfikacja może ulec zmianie bez zapowiedzi.

H3+™, H12+™, H-Scribe™, i VERITAS™ są znakami handlowymi firmy Mortara Instrument, Inc.

Microsoft® i Windows™ są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corp.

ENG 8