


Torebki papierowo-foliowe

do sterylizacji płaskie i z zakładką

opis produktu

Jednorazowe opakowania w formie torebek z zakładkami i płaskich, pozwalające na bezpieczną sterylizację oraz przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów, typów i przeznaczenia. Torebki STERIM® składają się z dwóch warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanalowym termo zgrzewem, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz gwarantuje bezpieczne i łatwe, bezpyłowe otwieranie. Gramatura specjalnego papieru medycznego wynosi 70 g/m² i została precyzyjnie dobrana zapewniając bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie.

Powierzchnia foliowa koloru zielonego wykonana jest z nowego 6-warstwowego MULTI kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52µm. Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na torebkach papierowo-foliowych nadrukowane są wskaźniki chemiczne klasy 1 sterylizacji STEAM, EO i FORM. Podstawowe informacje techniczne wymagane przez normy umieszczone są w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wszystkie napisy, wskaźniki oraz informacja o kierunku otwierania zostały umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem. Dodatkowo umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji mają ułatwić personelowi rozróżnienie pakietów sterylizowanych od niesterylizowanych. Zalecana temperatura zgrzewu wynosi 150-210°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia zgrzewającego. Torebki STERIM® zbiorczo zapakowane są w folię i specjalny karton papierowy, oznaczony etykietą identyfikacyjną.

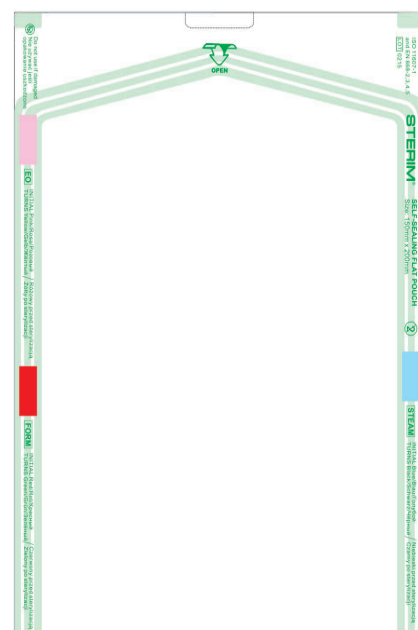

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe, formaldehydowe i tlenkiem etylenu różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1 PN EN 868 -2-3-4-5 ISO 9001 Dyrektywa CE 93/42 Klasa 1 wyrób medyczny niesterylny, CE	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, zdala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii umieszczony na torebce.